

DIGITAL orbital shaker

Compacto pero lleno de características de alta gama, convirtiéndolo en un agitador versátil para un amplio rango de protocolos.

El Digital Orbital Shaker (agitador orbital digital) de Heathrow Scientific es compacto pero está lleno de características de equipos de alta gama, convirtiéndolo en un agitador confiable y versátil para un amplio rango de protocolos. Su arranque lento reduce los derrames en contenedores llenos y su velocidad ajustable es compatible con la agitación de muestras sensibles o aplicaciones más vigorosas. La retroalimentación óptica del motor le permite ajustarse instantáneamente a los cambios de peso o cargas desbalanceadas para asegurar la reproducibilidad de los resultados.

- Adecuado para su uso en incubadoras y cuartos fríos mientras se mantenga dentro del rango de temperatura indicado
- Plataforma universal y cordones bungee le permiten crear matrices de soporte para contenedores de todas las formas y tamaños
- Pantalla retroiluminada de fácil lectura. El tiempo y la velocidad se pueden ajustar por separado

No. de parte: **HS120460**

Especificaciones

Rango de velocidad: 20 a 300 rpm, en incrementos de 1 rpm

Diámetro de órbita: 19.0 mm (0.75")

Rango del temporizador: 0 a 49 horas en incrementos de 1 segundo u operación continua

Carga máxima: 4.5 kg (10 lbs) con sistema de apagado por sobre carga

Corriente eléctrica: 110 a 240 VAC, 50/60 Hz con 4 adaptadores intercambiables



Condiciones de trabajo: 2° a 40°; 20 a 80% RH, sin condensación

Dimensiones de uso: 279 mm de ancho x 279 mm de profundidad (10.92 x 10.92 pulgadas)

Dimensiones totales: 314 mm de ancho x 197 mm de alto x 310 mm de fondo (10.92x10.92 pulgadas)

Garantía de cinco años

SÓLO USO EN INTERIORES




Los cordones bungee permiten crear sus propias matrices para soporte de contenedores de todas las formas y tamaños

Múltiples configuraciones con o sin los cordones bungee

El paquete incluye:

- Agitador orbital digital
- Plataforma universal
- Tapete de goma antideslizante para la plataforma
- Set de 8 cordones Bungee
- Toma eléctrica universal 110-240 V 50/60 Hz, con 4 adaptadores intercambiables

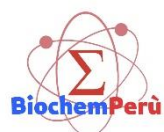

Dir.: Peje. De La Marina # 120 - 2do. Piso - Dpto. 201 - Pueblo Libre - Lima - Perú (Ref.: Alt. Cdra. 8 Av. De La Marina - Espalda Grifo PRIMAX)

Teléfonos: (+51) 968 189 344 - 968 185 088 - 924 415517 Teléf.: (51-1) 461-6316 / 642-9871 / 261-8685 Phone USA: 1-954-738-2016

E-mails: biochem@biochemperu.com, ventas@biochemperu.com com Skype: biomedical-peru

Facebook: [@BIOCHEMPERULABORATORIO](https://www.facebook.com/BIOCHEMPERULABORATORIO/)//IG: [biochemperu](https://www.instagram.com/biochemperu)